

ジェイフィード® ペグロック延長チューブ

Q-LOCK機構のついたペグロック専用の延長チューブ
QL注入器等との接続により確実なロックが可能



◆太径チューブ(4.7×6.5mm)を採用しているため、栄養剤等が詰まりにくくなっています。
 ※印がついている製品はキットに組み込まれているものと同じ製品になります。



先端形状はペグロックバルーンボタン専用のストレートとL型のほか、ソフトコネクタに接続可能なカテーテルアダプタも規格化



ジェイフィード ペグロック延長チューブ (医療機器認証番号: 224AABZX00173000)


品番	JANコード	規格	長さ	先端	備考	梱包単位
JF-PXL030CS	4987494093175	バルーンボタン専用	30cm	ストレート	クランプ付	2本×20箱=40本
JF-PXL030CL	4987494096718	バルーンボタン専用	30cm	L型	クランプ付	2本×20箱=40本
JF-PXL005S	4987494096732	バルーンボタン専用	5cm	ストレート	クランプなし	2本×20箱=40本
JF-PXL005CS	4987494251537	バルーンボタン専用	5cm	ストレート	クランプ付	2本×20箱=40本
JF-PXL030C	4987494099672	汎用チューブ型用	30cm	カテーテルアダプタ	クランプ付	10本×20箱=200本
JF-PXL060C	4987494235513	汎用チューブ型用	60cm	カテーテルアダプタ	クランプ付	10本×20箱=200本

※JF-PXL030C、JF-PXL060Cは、「経腸栄養ラインの接続部に関する基準」(厚生省医薬発第888号平成12年8月31日)に適合しています。

ジェイフィード® QL注入器

Q-LOCK機構のついた注入器

◆あらかじめキャップがついているので、先端部を保護し、吸引後の栄養剤等の漏れを防止。

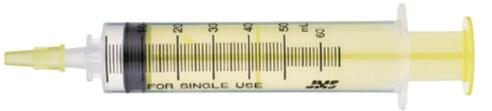


ペグロック延長チューブ等との接続により確実なロックが可能です。



ジェイフィードQL注入器 (医療機器届出番号: 34B1X00001000084)

品番	JANコード	容量	先端	規格	梱包単位
JF-SY50LVZ	4987494099665	50mL	無色	キャップ付 QL	10本×20箱=200本

ジェイフィード® ペグロックシステム 接続例

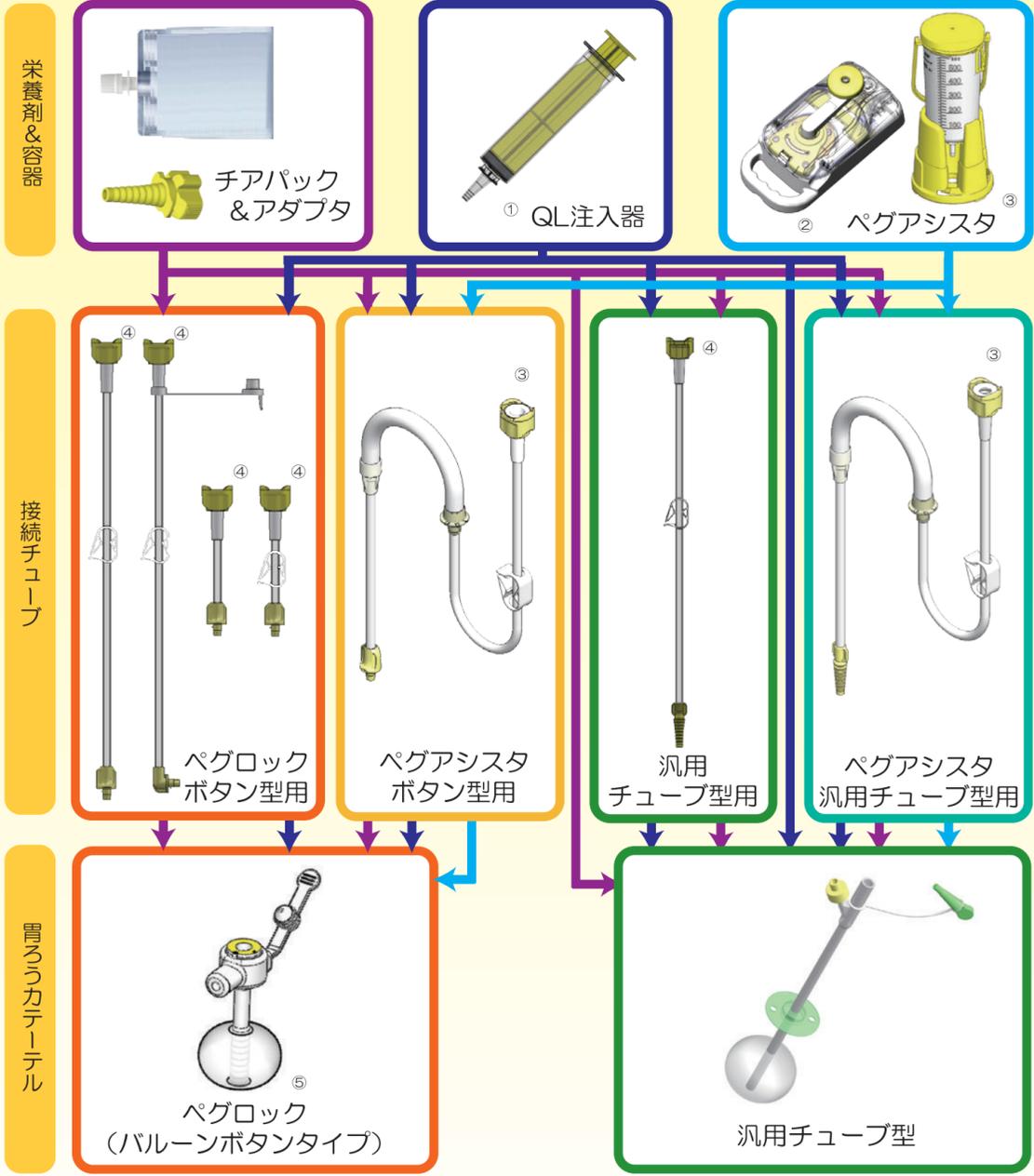

※ジェイフィードは株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。
 ※Q-LOCKは株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。
 ※製品の仕様及び外観は、品質・性能改良のため予告なく変更することがあります。

① 販売名: ジェイフィードQL注入器 医療機器届出番号: 34B1X00001000084
 ② 販売名: ジェイフィード ペグアシスタ 医療機器届出番号: 34B1X00001000077
 ③ 販売名: ジェイフィード ペグアシスタ専用栄養セット 医療機器届出番号: 34B1X00001000078
 ④ 販売名: ジェイフィード ペグロック延長チューブ 医療機器認証番号: 224AABZX00173000
 ⑤ 販売名: ジェイフィード ペグロック 医療機器認証番号: 225ACBZX00007000

ジェイフィード® ペグロックシステム



ロック化により、さらなる安全対策へ

JMS 製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
 ■お問い合わせ先
 カスタマーサポートセンター
 ☎ 0120-200-517 ☉ csc@jms.cc
 〒730-8652 広島市中区加古町12番17号
<http://www.jms.cc/>



2018.02.01XA215-JMS
 2018.09.03XA215-JMS

本マークは医療事故対策のために設定された厚生労働省基準に適合することを示す業界の自主的なマークです。



ジェイフィード® ペグロック

柔軟性に富み、生体適合性に優れたシリコン製のバルーンボタンタイプ

- ◆カテーテルの体表部は操作しやすい適度な大きさとなっています。
- ◆交換時のリスク低減のため、ガイドワイヤーを付属。




ロック接続可能！

カテーテルと接続チューブとの接続部はもちろん、QL注入器やQ-LOCK対応の栄養剤用アダプタであれば確実なロック接続が可能となり、接続部外れによる栄養剤飛散の心配がありません。

保険請求(特定保険医療材料)
交換用胃瘻カテーテル(1)胃留置型②バルーン型

接続チューブ着脱方法

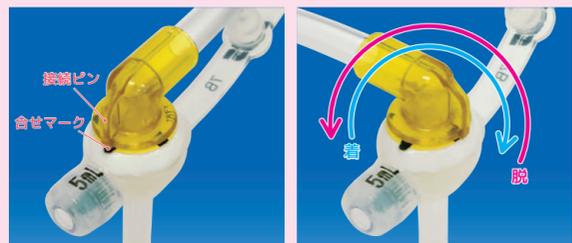

チューブのコネクタにある接続ピンと着脱ポジション(カテーテルの黒い合せマーク)をあわせて押し込み右に270°回転させ接続します。外すときはチューブのコネクタを左に回転させ、着脱ポジションにあわせてはずします。

※無理に取り外しますと、カテーテルもしくは本品が破損する可能性があります。

キット内容



- ①カテーテル……………1本
- ②バルーン拡張器……………1本
- ③ガイドワイヤー……………1本
- 接続チューブ
- ④ストレート型ショートタイプ(50mm) ……1本
- ⑤ストレート型タイプ(300mm) ……1本
- ⑥L型タイプ(300mm) ……1本

■規格一覧 (バルーンボタン タイプⅡ)

ジェイフィード ペグロック(医療機器認証番号:225ACBZX00007000)
製造販売業者:クリエートメディック株式会社

サイズ	品番	JANコード	外形	有効長	バルーン規定容量	梱包単位
14F	JF-PB1410B052	4542187208566	4.7mm	10mm	5mL	1セット
	JF-PB1415B052	4542187208573		15mm		
	JF-PB1417B052	4542187208580		17mm		
	JF-PB1420B052	4542187208597		20mm		
	JF-PB1425B052	4542187208603		25mm		
	JF-PB1430B052	4542187208610		30mm		
16F	JF-PB1610B052	4542187208627	5.3mm	10mm	5mL	1セット
	JF-PB1615B052	4542187208634		15mm		
	JF-PB1617B052	4542187208641		17mm		
	JF-PB1620B052	4542187208658		20mm		
	JF-PB1625B052	4542187208665		25mm		
	JF-PB1630B052	4542187208672		30mm		
18F	JF-PB1815B052	4542187208702	6.0mm	15mm	5mL	1セット
	JF-PB1817B052	4542187208719		17mm		
	JF-PB1820B052	4542187208726		20mm		
	JF-PB1825B052	4542187208733		25mm		
	JF-PB1830B052	4542187208740		30mm		
	JF-PB1835B052	4542187208757		35mm		
20F	JF-PB2020B052	4542187208771	6.7mm	20mm	5mL	1セット
	JF-PB2025B052	4542187208795		25mm		
	JF-PB2030B052	4542187208818		30mm		
	JF-PB2035B052	4542187208832		35mm		
	JF-PB2040B052	4542187208863		40mm		
	JF-PB2045B052	4542187208887		45mm		
24F	JF-PB2420B202	4542187208894	8.0mm	20mm	20mL	1セット
	JF-PB2425B202	4542187208900		25mm		
	JF-PB2430B202	4542187208917		30mm		
	JF-PB2435B202	4542187208924		35mm		
	JF-PB2440B202	4542187208931		40mm		
	JF-PB2445B202	4542187208948		45mm		

ジェイフィード® ペグロック内視鏡用アダプタ

ペグロックに接続し、内視鏡をスムーズに挿入させるために使用するアダプタ

※ジェイフィード ペグロック専用の内視鏡用アダプタです。



内視鏡用アダプタ

ペグカテーテルの逆止弁を傷つけることなく内視鏡を挿入できます。シリンジ等(エアポンプ)で内視鏡の挿入と空気の注入を同時に行えます。※空気量の調整用にクランプを利用してください。

【ペグカテーテル規格適用】18F以上

※内視鏡
製造販売業者:HOYA株式会社
販売名:ペンタックス ポータブルマルチスコープ
モデル名:FP-7RBS2
医療機器認証番号:222AGBZX00043000

ジェイフィード ペグロック内視鏡用アダプタ(医療機器届出番号:34B1X00001000099)

品番	JANコード	型式/規格	備考	梱包単位
JF-PBSAC	4987494281435	ボタン用/クランプ付	ジェイフィードペグロック専用	2本×20箱=40本

内視鏡による確認方法

1.内視鏡用アダプタの接続

アダプタを挿入し、右に回転させ接続します。

2.内視鏡の挿入

【推奨】内視鏡を挿入する前に内視鏡及び内視鏡用アダプタの内視鏡挿入口に少量の水溶性潤滑剤を塗布してください。

3.留置状態の検査

シリンジ等(エアポンプ)を接続し、空気を注入してください。

例:エアポンプ

4.内視鏡の抜去及び内視鏡用アダプタの取り外し

①内視鏡を抜き取ります。
②アダプタを左に回転させ、着脱ポジションにあわせて取り外します。
③カテーテルのキャップを閉じます。

※内視鏡の操作方法に従い、検査してください。