

ジェイフィード® 経腸栄養システム

J-Feed Enteral nutrition system



ISO
80369-

3

It is always safe.

確かな安全と安心を・・・

contents

ジェイフィード® 栄養セット	4
ジェイフィード® 栄養ボトル	5
ジェイフィード® 栄養剤用バッグ	6
ジェイフィード® フィーディングバッグ	7
ジェイフィード® 栄養カテーテル	8
JMS E・D・チューブ	10
ジェイフィード® ENシリンジ	11
ジェイフィード® ENシリンジキャップ	11
ジェイフィード® ペグロック	12
ジェイフィード® ペグロック延長チューブ	14
ジェイフィード® ペグロック内視鏡アダプタ	14
ジェイフィード® EN延長チューブ	15
ジェイフィード® EN Yジョイント	15
経腸栄養ポンプ Amika®	16
Amika® ポンプ用経腸栄養セット	17
フレゼニウス ポンプ用経腸栄養セット	17
ジェイフィード® EN採液チップ	18
ジェイフィード® EN採液ノズル	18
ジェイフィード® ENSワブ	19
ジェイフィード® ENプロテクトアダプタ	19
ジェイフィード® ENシリンジカバー	20
ジェイフィード® ENコネクタカバー	20
pHチェッカー5.5	21
EN変換コネクタ	22



ジェイ・エム・エスの**ジェイフィード® 経腸栄養システム**はバッグやボトルなどの容器から栄養カテーテル等までトータルシステムとしてラインナップ。乳幼児領域から一般領域まで幅広く規格を取り揃えております。

基本色調ならびに接続部は「**紫色**」で統一し、ひと目でISO 80369-3に適合した経腸栄養システムとして識別できます。

栄養剤用バッグや栄養ボトルと栄養セットの接続部には従来より採用しております「**Q-LOCK®**」により、離脱防止による安全対策を提案しています。




ポリ塩化ビニル樹脂を使用していない **PVCフリータイプの製品も充実**しています。



ジェイフィード® 経腸栄養システム

J-Feed Enteral Nutrition System


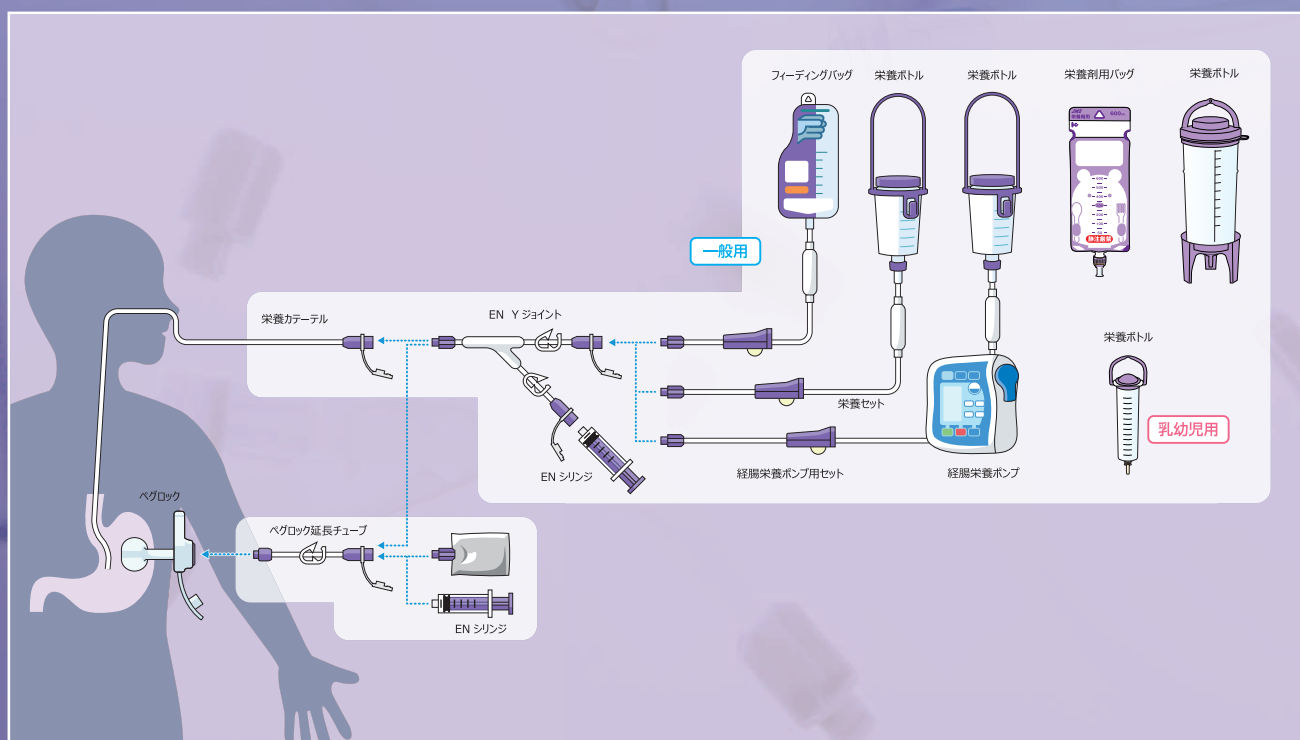


Q-LOCK[®] 機能付栄養セット



ジェイフィード[®] 栄養セット

- ジェイフィード栄養ボトルやジェイフィード栄養剤用バッグ等とのスムーズな接続と確実なロックが可能。
- ロック化により、離脱防止による安全対策に加えて、接続手技の標準化ができます。
- 接続口形状がQ-LOCK[®] 対応している一部の経腸栄養剤のバッグ（RTH製剤）にもロック接続が可能。
- 粘稠性の高い栄養剤でも流れやすい太いチューブを採用。

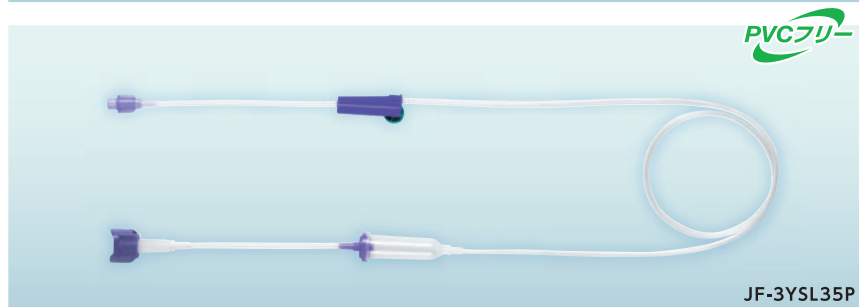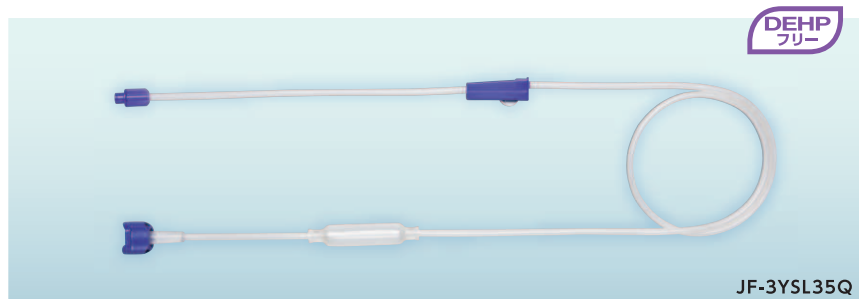


コネクタ部

Q-LOCK[®] 接続



Q-LOCK[®] 対応のバッグ接続 ※接続の一例：ラコール／（株）大塚製薬工場

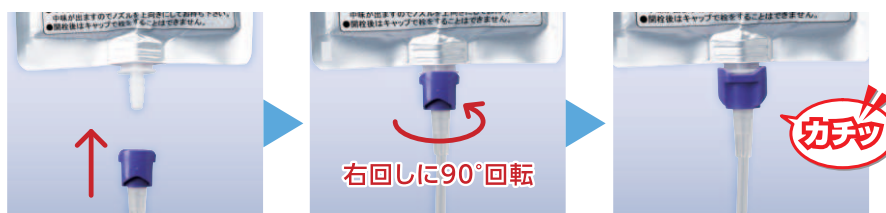

品 番	JANコード	型 式	規 格	梱包単位
JF-3YSL35Q	4987494313815	DEHPフリー QL	カテーテルアダプタ	20本×10箱=200本
JF-3YSL35P	4987494315338	PVCフリー QL	カテーテルアダプタ	20本×10箱=200本

販売名：ジェイフィード栄養セット 医療機器届出番号：34B1X00001000063

用途にあわせて選択可能な栄養ボトル

ジェイフィード® 栄養ボトル

- 容量は100mL、200mL、600mL、1,200mLの4種類。


- ジェイフィード栄養セットとのスムーズな接続と確実なロックが可能。

※ジェイフィード栄養セット(p.4)とあわせてご使用ください。

- ロック化により、離脱防止による安全対策に加えて、接続手技の標準化ができます。

- JF-FPV020とJF-FPV060にはチューブホルダがついており、栄養セットをチューブホルダにかけることでチューブをコンパクトにまとめることが可能。

- JF-FPV120は着脱可能な架台付。JF-FPV060専用の架台も用意(別売)。

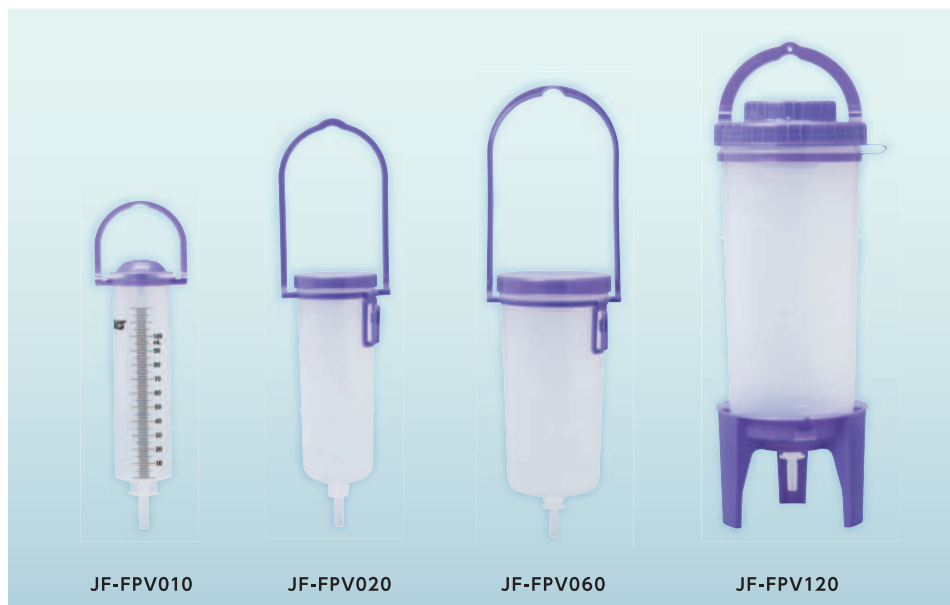


600mL ボトル専用架台



JF-FPDV01
JF-FPV060を接続した状態▶

Q-LOCK® 接続

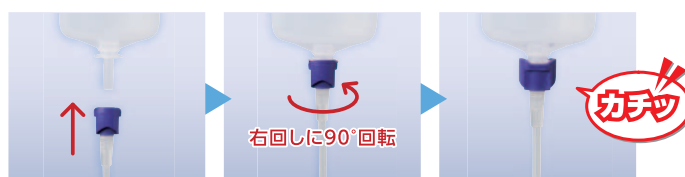

チューブホルダ ※右は栄養セットをかけた状態



	品 番	JANコード	容 量	規 格	梱包単位
ボトル単体	JF-FPV010	4987494318438	100mL	QL セットなし	10個×12箱=120個
	JF-FPV020	4987494318414	200mL	QL セットなし	5個× 4箱= 20個
	JF-FPV060	4987494318407	600mL	QL セットなし	5個× 4箱= 20個
	JF-FPV120	4987494318421	1,200mL	QL セットなし	10個
架 台	JF-FPDV01	4987494318551	-	600mLボトル専用	2個× 6箱= 12個

販売名:ジェイフィード栄養ボトル 医療機器届出番号: 34B1X00001000075

栄養剤の集中調製をサポート

ジェイフィード® 栄養剤用バッグ

- 集中調製方式向けの栄養剤用バッグ。
- 容量は300mLと600mLの2種類。
- ジップを開封することで、加水や追加投与が可能。また、側面開口方式採用により、開封後もつるすことが可能。
- ウェーブ状のシール加工により、不均一なバッグ変形を防止し、調製時と投与時の双方において目盛精度が向上。
- 「紫色」を基調とした“ユニーク”なデザインにより、栄養剤用と識別しやすく、**静注厳禁** も大きく表示。
- 取っ手マークを300mLは赤色、600mLは紫色と区別しやすくなっています。
- ジェイフィード栄養セットとあわせて使用することによりスムーズな接続と確実なロックが可能。

※栄養セットは専用のジェイフィード栄養セット (P.4) とあわせてご使用ください。


- 接続した栄養セットをダイヤモンドホールにかけることでチューブをコンパクトにまとめることが可能。




加 水




側面開口

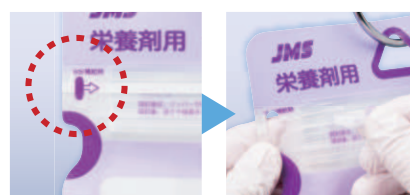

目盛制度向上

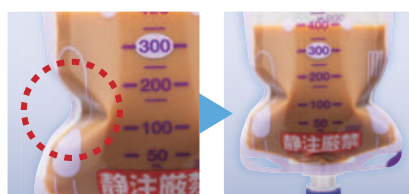

ダイヤモンドホール

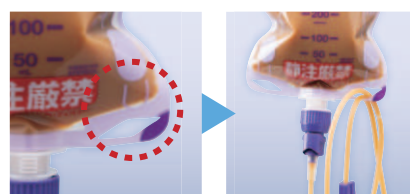

チューブをかけた状態

栄養剤用バッグ専用架台

- 栄養剤の調製を行うための専用架台。
- 一度に4つのバッグを調製することが可能。
- コンパクトに折りたたむことができ、保管場所をとりません。

※ジェイフィード栄養剤用バッグとあわせてご使用ください。



架台にバッグをセットした状態

品 番	JANコード	容 量	規 格	梱包単位
JF-FS030N	4987494284580	300mL	セットなし	120バッグ(10バッグ×12袋)
JF-FS060N	4987494284566	600mL	セットなし	220バッグ(10バッグ×22袋)

販売名:ジェイフィード栄養剤用バッグ 医療機器届出番号: 34B1X00001000067

品 番	JANコード	型 式	規 格	梱包単位
JF-FD04	4987494051243	4連	セットなし	1台

品名:栄養剤用バッグ専用架台 非医療機器




架台を折りたたんだ状態

バッグと栄養セットが一体化

ジェイフィード® フィーディングバッグ

- 容量は500mLと1,000mLの2種類。
- 取っ手を使って2種類の開口操作が可能。
- 手に持った操作では、片手で確実に開閉でき、注入口も広くなり、注入しやすくなっています。
- 「紫色」を基調としたデザインにより、栄養剤用と識別しやすく、**静注厳禁**も大きく表示。
- バッグと栄養セットが一体となっているので、栄養セット装着の手間を省略。
- 栄養セットのチューブをダイヤモンドホールにかけることで、チューブをコンパクトにまとめることが可能。

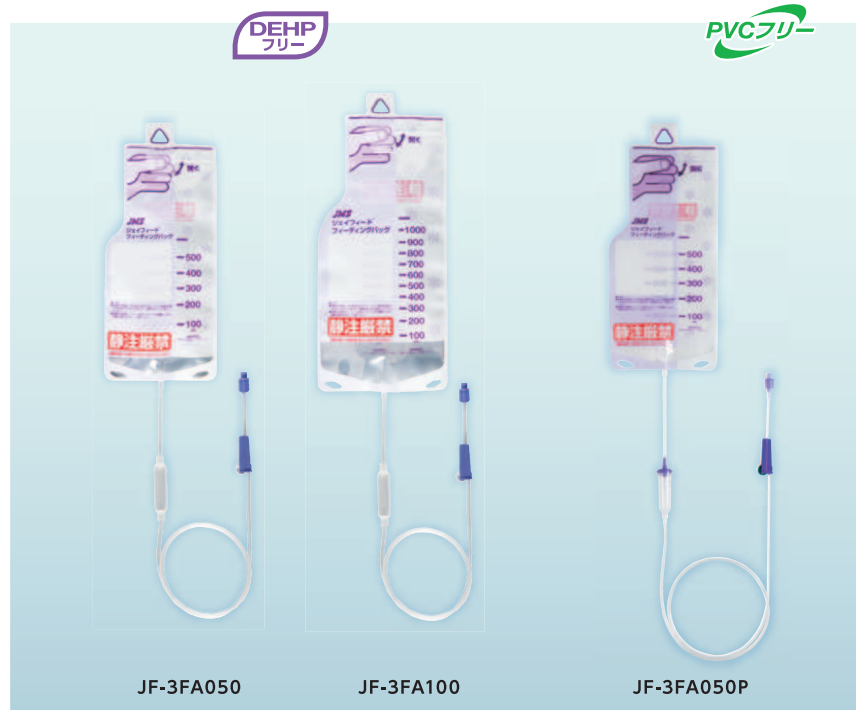

取っ手操作




手に持って



フックにかけて

注入口

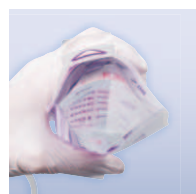

ダイヤモンドホール



チューブをかけた状態


品 番	JANコード	容 量	規 格	梱包単位
JF-3FA050	4987494315512	500mL	DEHPフリー	20個×4箱=80個
JF-3FA100	4987494315529	1,000mL	DEHPフリー	20個×4箱=80個
JF-3FA050P	4987494315543	500mL	PVCフリー	20個×4箱=80個

販売名:ジェイフィード フィーディングバッグ 医療機器届出番号: 34B1X00001000076

乳幼児用から一般用まで幅広い品揃え

ジェイフィード® 栄養カテーテル

- 乳幼児用から一般用(3F~16F)まで幅広い規格を取り揃え。
- 挿入及び留置位置の確認が可能なX線不透過の造影ライン入。
- 目盛は、乳幼児用では、先端15cmから17cmまで1cm刻みに深度目盛と数字を印字したスタンダードタイプその他、先端5cmから60cm※まで5cm刻みに深度目盛と数字を印字したMPタイプや先端10cmから30cmまで1cm刻みに深度目盛と数字を印字したSタイプを取り揃え。また、一般用は、先端15cmから90cmまで5cm刻みに深度目盛と数字を印字しており、多種の規格を取り揃えているので、使用用途にあわせて選択が可能。

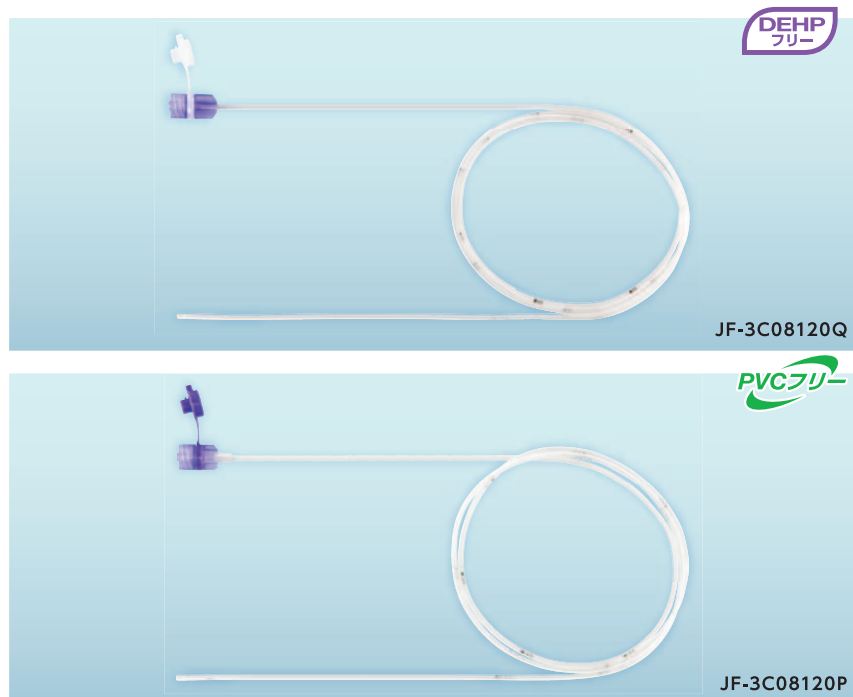


- ※
- 4F: 先端から 5cm~30cm
 - 5F: 先端から 5cm~30cm
 - 6F: 先端から 5cm~40cm
 - 7F: 先端から 5cm~50cm
 - 8F: 先端から 5cm~60cm

乳幼児用

スタンダードタイプ (3F~8Fの40cm)

先端から **15~17cm** まで **1cm刻み** に
深度目盛と数字を印字

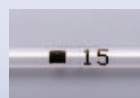

MP(多用途)タイプ

先端から **5~60cm** まで **5cm刻み** に
深度目盛と数字を印字

※4F・5Fは5cm~30cm、6Fは5cm~40cm、7Fは5cm~50cm、8Fは5cm~60cm



Sタイプ

先端から **10~30cm** まで **1cm刻み** に
深度目盛と数字を印字




保険償還分類(特定保険医療材料)

- 栄養カテーテル(1)
経鼻用① 一般用 A
- 栄養カテーテル(1)
経鼻用② 乳幼児用 イ 非DEHP型 B
- 在宅寝たきり患者処置用栄養用
ディスプレイカテーテル(1)
経鼻用① 一般用 A
- 在宅寝たきり患者処置用栄養用
ディスプレイカテーテル(1)
経鼻用② 乳幼児用 イ 非DEHP型 B

一般用

スタンダードタイプ (8F~16Fの120cm)

先端から **15~90cm** まで **5cm刻み** に
深度目盛と数字を印字 (15~35cmまでは矢印付)

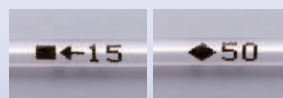


品 番	JANコード	Fサイズ	長 さ	目 盛	規 格	保険償還分類	梱包単位
JF-3C03040Q	4987494314478	3F	40cm	乳幼児スタンダード	DEHPフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C04040Q	4987494314485	4F	40cm	乳幼児スタンダード	DEHPフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C05040Q	4987494314492	5F	40cm	乳幼児スタンダード	DEHPフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C06040Q	4987494314508	6F	40cm	乳幼児スタンダード	DEHPフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C07040Q	4987494314515	7F	40cm	乳幼児スタンダード	DEHPフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C08040Q	4987494314522	8F	40cm	乳幼児スタンダード	DEHPフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C05120Q	4987494314539	5F	120cm	一般用スタンダード	DEHPフリー	A	25本×8箱=200本
JF-3C08120Q	4987494314546	8F	120cm	一般用スタンダード	DEHPフリー	A	25本×8箱=200本
JF-3C10120Q	4987494314553	10F	120cm	一般用スタンダード	DEHPフリー	A	25本×8箱=200本
JF-3C12120Q	4987494314560	12F	120cm	一般用スタンダード	DEHPフリー	A	25本×8箱=200本
JF-3C14120Q	4987494314577	14F	120cm	一般用スタンダード	DEHPフリー	A	25本×8箱=200本
JF-3C15120Q	4987494314584	15F	120cm	一般用スタンダード	DEHPフリー	A	25本×8箱=200本
JF-3C04040QM	4987494314591	4F	40cm	MP	DEHPフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C06060QM	4987494314607	6F	60cm	MP	DEHPフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C07070QM	4987494314614	7F	70cm	MP	DEHPフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C08080QM	4987494314621	8F	80cm	MP	DEHPフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C03040QS	4987494320080	3F	40cm	S	DEHPフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C04040QS	4987494320097	4F	40cm	S	DEHPフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C05040QS	4987494320103	5F	40cm	S	DEHPフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C06040QS	4987494325580	6F	40cm	S	DEHPフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C06060QS	4987494320110	6F	60cm	S	DEHPフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C07070QS	4987494320127	7F	70cm	S	DEHPフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C08080QS	4987494320134	8F	80cm	S	DEHPフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C03040P	4987494314638	3F	40cm	乳幼児スタンダード	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C04040P	4987494314645	4F	40cm	乳幼児スタンダード	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C04060P	4987494314942	4F	60cm	乳幼児スタンダード	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C05040P	4987494314652	5F	40cm	乳幼児スタンダード	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C05060P	4987494314959	5F	60cm	乳幼児スタンダード	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C06040P	4987494314669	6F	40cm	乳幼児スタンダード	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C07040P	4987494314676	7F	40cm	乳幼児スタンダード	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C08040P	4987494314683	8F	40cm	乳幼児スタンダード	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C08120P	4987494314935	8F	120cm	一般用スタンダード	PVCフリー	A	25本×8箱=200本
JF-3C10120P	4987494314966	10F	120cm	一般用スタンダード	PVCフリー	A	25本×8箱=200本
JF-3C12120P	4987494314973	12F	120cm	一般用スタンダード	PVCフリー	A	25本×8箱=200本
JF-3C14120P	4987494314980	14F	120cm	一般用スタンダード	PVCフリー	A	25本×8箱=200本
JF-3C15120P	4987494314997	15F	120cm	一般用スタンダード	PVCフリー	A	25本×8箱=200本
JF-3C16120P	4987494315000	16F	120cm	一般用スタンダード	PVCフリー	A	20本×8箱=160本
JF-3C04040PM	4987494315017	4F	40cm	MP	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C05050PM	4987494315024	5F	50cm	MP	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C06060PM	4987494315031	6F	60cm	MP	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C07070PM	4987494315048	7F	70cm	MP	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C08080PM	4987494315055	8F	80cm	MP	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C03040PS	4987494315550	3F	40cm	S	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C04040PS	4987494315062	4F	40cm	S	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C05040PS	4987494315093	5F	40cm	S	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C06040PS	4987494315109	6F	40cm	S	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C07040PS	4987494315123	7F	40cm	S	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C08040PS	4987494315130	8F	40cm	S	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C06060PS	4987494315178	6F	60cm	S	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C07070PS	4987494315185	7F	70cm	S	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C08080PS	4987494315192	8F	80cm	S	PVCフリー	B	25本×8箱=200本
JF-3C04090PS	4987494315147	4F	90cm	S	PVCフリー	A	25本×8箱=200本
JF-3C05090PS	4987494315154	5F	90cm	S	PVCフリー	A	25本×8箱=200本
JF-3C06090PS	4987494315161	6F	90cm	S	PVCフリー	A	25本×8箱=200本

販売名:ジェイフィールド栄養カテーテル 医療機器認証番号: 222AABZX00219000

表面が滑らかで柔軟なチューブを実現

JMS E・D・チューブ

- 挿入を容易にするスタイレット付。
- 先端は非金属性のオリブタイプのため、MRI撮影時でも使用可能。
(スタイレットを抜去した状態)
- スタイレットを挿入した状態で胃液の吸引やエアの注入も可能。
- 留置中に硬くなりにくく、コシがあり内径の広い*ポリウレタン製のチューブを採用。
※当社比
- 挿入及び留置位置の確認が可能なエックス線不透過の造影ライン入。
- チューブ長は80cmと120cm規格を用意。

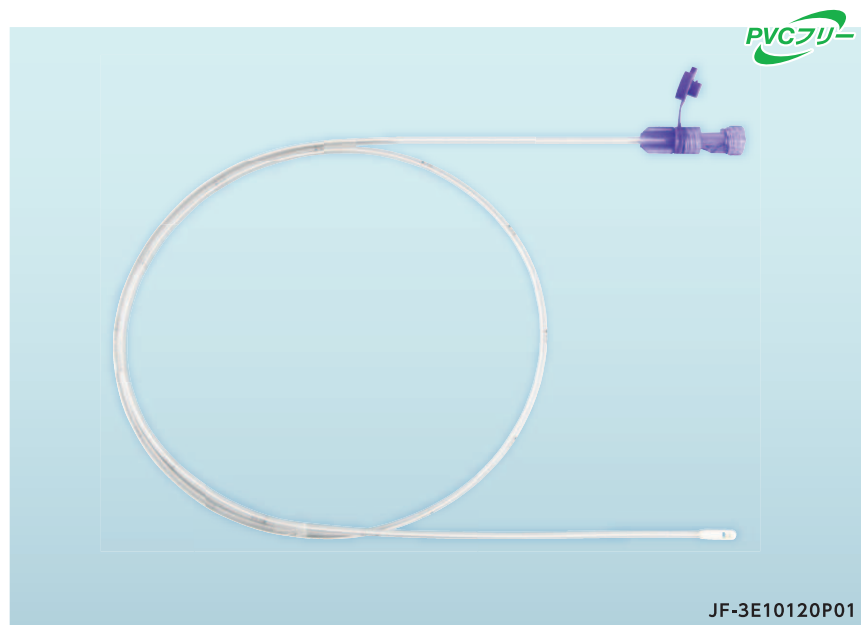

保険償還分類 (特定保険医療材料)

栄養カテーテル(1) 経鼻用 ③ 経腸栄養用

在宅寝たきり患者処置用栄養用
ディスプレイカテーテル(1)
経鼻用 ③ 経腸栄養用


品 番	JANコード	Fサイズ	長 さ	規 格	梱包単位
JF-3E05080P01	4987494315277	5F	80cm	PVCフリー	10本×5箱=50本
JF-3E06080P01	4987494315284	6F	80cm	PVCフリー	10本×5箱=50本
JF-3E08080P01	4987494315291	8F	80cm	PVCフリー	10本×5箱=50本
JF-3E10080P01	4987494315307	10F	80cm	PVCフリー	10本×5箱=50本
JF-3E12080P01	4987494315314	12F	80cm	PVCフリー	10本×5箱=50本
JF-3E05120P01	4987494315222	5F	120cm	PVCフリー	10本×5箱=50本
JF-3E06120P01	4987494315239	6F	120cm	PVCフリー	10本×5箱=50本
JF-3E08120P01	4987494315246	8F	120cm	PVCフリー	10本×5箱=50本
JF-3E10120P01	4987494315253	10F	120cm	PVCフリー	10本×5箱=50本
JF-3E12120P01	4987494315260	12F	120cm	PVCフリー	10本×5箱=50本

販売名: JMS E・D・チューブ 医療機器認証番号: 15500BZZ01461000

1mL～100mL まで豊富な品揃え

ジェイフィード® ENシリンジ

- 全規格キャップ付 (採液チップ付規格除く)。
- 1～5mLは微量注入を可能とする構造 (LDT<Low Dose Tip>構造)。
- 1mLと2.5mLはあらかじめ採液チップのついた規格も取り揃え。

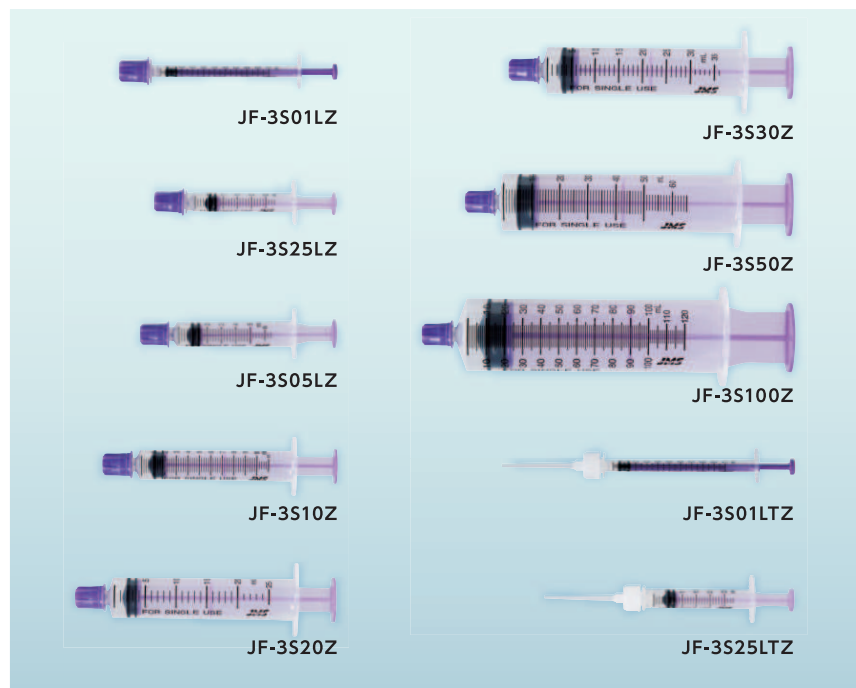

品 番	JANコード	容 量	型 式	規 格	梱包単位
JF-3S01LZ	4987494314782	1mL	キャップ付	LDT	100本×16箱=1,600本
JF-3S25LZ	4987494314805	2.5mL	キャップ付	LDT	100本×16箱=1,600本
JF-3S05LZ	4987494314812	5mL	キャップ付	LDT	100本×12箱=1,200本
JF-3S10Z	4987494314829	10mL	キャップ付		100本× 6箱= 600本
JF-3S20Z	4987494314836	20mL	キャップ付		50本×12箱= 600本
JF-3S30Z	4987494314843	30mL	キャップ付		50本× 6箱= 300本
JF-3S50Z	4987494314850	50mL	キャップ付		50本× 6箱= 300本
JF-3S100Z	4987494314867	100mL	キャップ付		25本× 8箱= 200本
JF-3S01LTZ	4987494314874	1mL	採液チップ付	LDT	100本×12箱=1,200本
JF-3S25LTZ	4987494314881	2.5mL	採液チップ付	LDT	100本×12箱=1,200本

販売名:ジェイフィードENシリンジ 医療機器届出番号: 34B1X00001000107

ジェイフィード® ENシリンジキャップ

- 栄養剤等を採取したジェイフィードENシリンジに接続し、先端部を保護。
- 1mL～100mLのENシリンジに使用可能。



品 番	JANコード	梱包単位
JF-3Z	4987494314706	50個×10箱=500個

販売名:ジェイフィードENシリンジキャップ 医療機器届出番号: 34B1X00001000112

ペグロックシステム

ジェイフィード® ペグロック

- 柔軟性に富み、生体適合性に優れたシリコーン製のバルーンボタンタイプ。
- 接続用コネクター受け部の孔径は大口径に設計されているため、粘度の高い栄養剤や薬剤投与時の注入抵抗を軽減。
- カテーテルの体表部は操作しやすい適度な大きさ。
- 交換時のリスク低減のため、ガイドワイヤーを付属。




接続用コネクター受け部

JF-3PB1825B05

保険償還分類 (特定保険医療材料)

交換用胃瘻カテーテル(1)胃留置型
②バルーン型用

キット内容

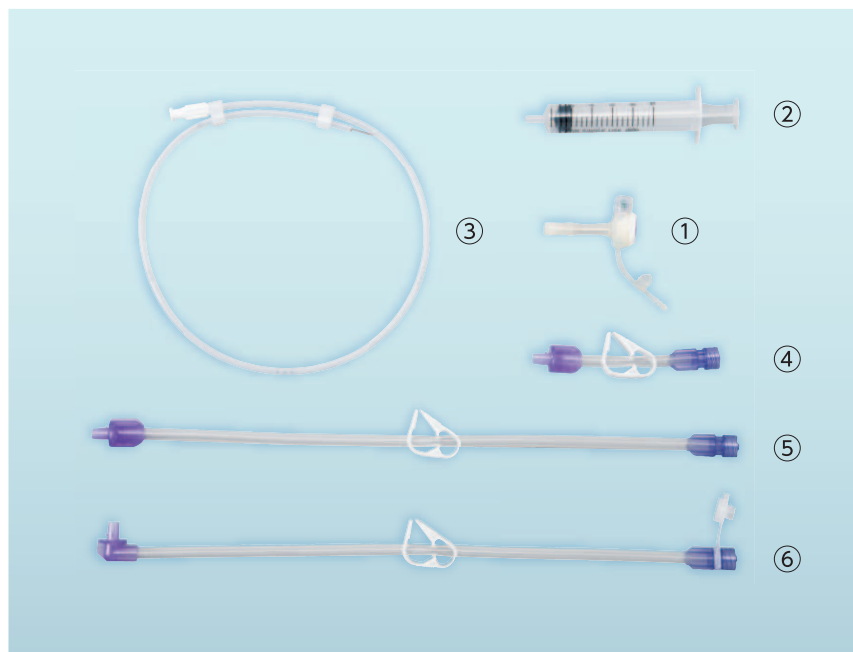

- ① カテーテル 1本
- ② バルーン拡張器 1本
- ③ ガイドワイヤー 1本

接続チューブ

- ④ ストレート型ショートタイプ(50mm) 1本
- ⑤ ストレート型タイプ(300mm) 1本
- ⑥ L型タイプ(300mm) 1本

※製造販売業者: クリエイトメディック株式会社

品 番	JANコード	Fサイズ	外 径	有効長	バルーン規定容量	梱包単位
JF-3PB1410B05	4542187217322	14F	4.7mm	10mm	5mL	1セット
JF-3PB1415B05	4542187217339	14F	4.7mm	15mm	5mL	1セット
JF-3PB1417B05	4542187217346	14F	4.7mm	17mm	5mL	1セット
JF-3PB1420B05	4542187217353	14F	4.7mm	20mm	5mL	1セット
JF-3PB1425B05	4542187217360	14F	4.7mm	25mm	5mL	1セット
JF-3PB1430B05	4542187217377	14F	4.7mm	30mm	5mL	1セット
JF-3PB1610B05	4542187217384	16F	5.3mm	10mm	5mL	1セット
JF-3PB1615B05	4542187217391	16F	5.3mm	15mm	5mL	1セット
JF-3PB1617B05	4542187217407	16F	5.3mm	17mm	5mL	1セット
JF-3PB1620B05	4542187217414	16F	5.3mm	20mm	5mL	1セット
JF-3PB1625B05	4542187217421	16F	5.3mm	25mm	5mL	1セット
JF-3PB1630B05	4542187217438	16F	5.3mm	30mm	5mL	1セット
JF-3PB1635B05	4542187217445	16F	5.3mm	35mm	5mL	1セット
JF-3PB1640B05	4542187217452	16F	5.3mm	40mm	5mL	1セット
JF-3PB1815B05	4542187217469	18F	6.0mm	15mm	5mL	1セット
JF-3PB1817B05	4542187217476	18F	6.0mm	17mm	5mL	1セット
JF-3PB1820B05	4542187217483	18F	6.0mm	20mm	5mL	1セット
JF-3PB1825B05	4542187217490	18F	6.0mm	25mm	5mL	1セット
JF-3PB1830B05	4542187217506	18F	6.0mm	30mm	5mL	1セット
JF-3PB1835B05	4542187217513	18F	6.0mm	35mm	5mL	1セット
JF-3PB1840B05	4542187217520	18F	6.0mm	40mm	5mL	1セット
JF-3PB2020B05	4542187217537	20F	6.7mm	20mm	5mL	1セット
JF-3PB2025B05	4542187217544	20F	6.7mm	25mm	5mL	1セット
JF-3PB2030B05	4542187217551	20F	6.7mm	30mm	5mL	1セット
JF-3PB2035B05	4542187217568	20F	6.7mm	35mm	5mL	1セット
JF-3PB2040B05	4542187217575	20F	6.7mm	40mm	5mL	1セット
JF-3PB2045B05	4542187217582	20F	6.7mm	45mm	5mL	1セット
JF-3PB2420B10	4542187217599	24F	8.0mm	20mm	10mL	1セット
JF-3PB2425B10	4542187217605	24F	8.0mm	25mm	10mL	1セット
JF-3PB2430B10	4542187217612	24F	8.0mm	30mm	10mL	1セット
JF-3PB2435B10	4542187217629	24F	8.0mm	35mm	10mL	1セット
JF-3PB2440B10	4542187217636	24F	8.0mm	40mm	10mL	1セット
JF-3PB2445B10	4542187217643	24F	8.0mm	45mm	10mL	1セット


販売名:ジェイフィールド ペグロック 医療機器認証番号:225ACBZX00007000

ジェイフィード® ペグロック延長チューブ


- 栄養剤等が詰まりにくい太径チューブ(チューブ径:4.7×6.5mm)を採用。
- 先端形状はペグロックバルーンボタン専用のストレートとL型のほか、スタンダードなISOメスコネクタも規格化。



先端形状

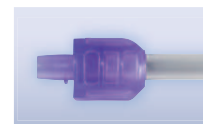

ストレート

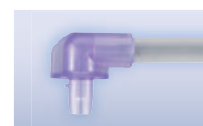

L型




ISOメスコネクタ

品 番	JANコード	長 さ	先 端	規 格	備 考	梱包単位
JF-3PXL030CS	4987494314751	30cm	ストレート	ペグロックバルーンボタン専用	クランプ付	2本×20箱= 40本
JF-3PXL030CL	4987494314720	30cm	L型	ペグロックバルーンボタン専用	クランプ付	2本×20箱= 40本
JF-3PXL005CS	4987494314768	5cm	ストレート	ペグロックバルーンボタン専用	クランプ付	2本×20箱= 40本
JF-3PXL030C	4987494314737	30cm	ISOメスコネクタ	ISOオスコネクタ用	クランプ付	10本×20箱=200本
JF-3PXL060C	4987494314744	60cm	ISOメスコネクタ	ISOオスコネクタ用	クランプ付	10本×20箱=200本

販売名: ジェイフィード ペグロック延長チューブ 医療機器認証番号: 224AABZX00173000

ジェイフィード® ペグロック内視鏡アダプタ

- ペグロックに接続し、内視鏡をスムーズに挿入させるために使用するアダプタ(適用規格:18F以上)。
- ペグカテーテルの逆止弁を傷つけることなく内視鏡を挿入できます。
- シリンジ等(エアポンプ)で内視鏡の挿入と空気の注入を同時に行えます(空気量の調整用にクランプを利用してください)。

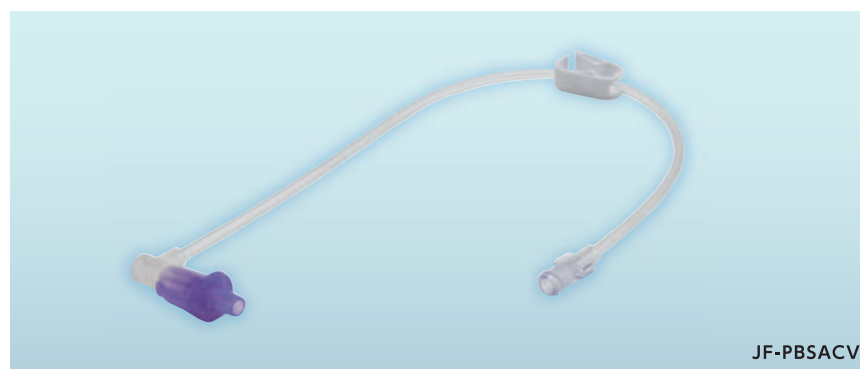

適用内視鏡

販売名: ペンタックス ポータブルマルチスコープ
モデル名: FP-7RBS2
医療機器認証番号: 222AGBZX00043000
製造販売業者: HOYA株式会社



品 番	JANコード	型 式	規 格	梱包単位
JF-PBSACV	4987494319985	ボタン用	クランプ付	2本×20箱=40本

販売名: ジェイフィード ペグロック内視鏡用アダプタ 医療機器届出番号: 34B1X00001000099

用途にあわせたEN延長チューブとYジョイント

ジェイフィード® EN延長チューブ

- ENシリンジや栄養セットと栄養カテーテル等をつなぐためのチューブ。
- 太さや長さも用途に合わせて選択できるよう取り揃え。

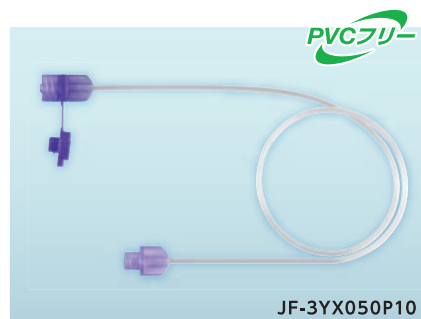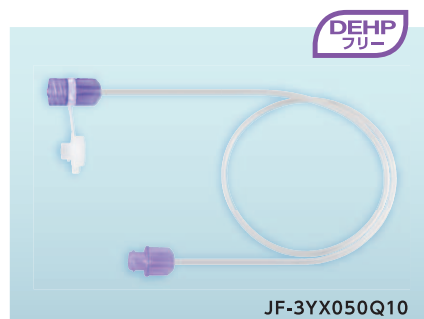


品 番	JANコード	内 径	外 径	長 さ	規 格	梱包単位
JF-3YX050Q10	4987494315352	1.0mm	2.7mm	50cm	DEHPフリー	25本×16箱=400本
JF-3YX070Q10	4987494315369	1.0mm	2.7mm	70cm	DEHPフリー	25本×16箱=400本
JF-3YX100Q10	4987494315376	1.0mm	2.7mm	100cm	DEHPフリー	25本×16箱=400本
JF-3YX050Q25	4987494315390	2.5mm	3.8mm	50cm	DEHPフリー	25本×16箱=400本
JF-3YX100Q25	4987494315406	2.5mm	3.8mm	100cm	DEHPフリー	20本×16箱=320本
JF-3YX050Q35	4987494315413	3.5mm	5.0mm	50cm	DEHPフリー	20本×16箱=320本
JF-3YX100Q35	4987494315420	3.5mm	5.0mm	100cm	DEHPフリー	15本×16箱=240本
JF-3YX050P10	4987494315437	1.0mm	2.0mm	50cm	PVCフリー	25本×16箱=400本
JF-3YX070P10	4987494315444	1.0mm	2.0mm	70cm	PVCフリー	25本×16箱=400本
JF-3YX100P10	4987494315451	1.0mm	2.0mm	100cm	PVCフリー	25本×16箱=400本
JF-3YX050P17	4987494315468	1.7mm	2.7mm	50cm	PVCフリー	25本×16箱=400本
JF-3YX070P17	4987494315475	1.7mm	2.7mm	70cm	PVCフリー	25本×16箱=400本
JF-3YX100P17	4987494315482	1.7mm	2.7mm	100cm	PVCフリー	25本×16箱=400本
JF-3YX050P25	4987494315499	2.5mm	3.8mm	50cm	PVCフリー	25本×16箱=400本
JF-3YX100P25	4987494315505	2.5mm	3.8mm	100cm	PVCフリー	20本×16箱=320本

販売名:ジェイフィードEN延長チューブ 医療機器認証番号: 222AABZX00037000

ジェイフィード® EN Yジョイント

- 三方活栓に代わるデバイスとして使用可能。
- 栄養剤や医薬品等の側注投与に便利。

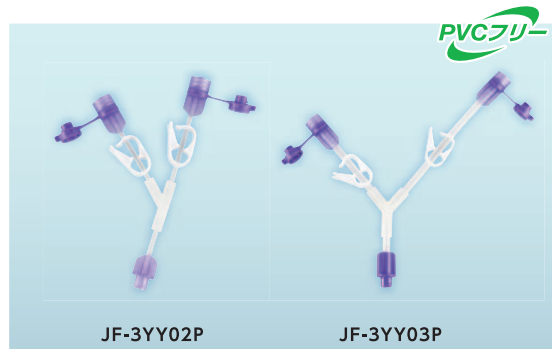

品 番	JANコード	型 式	規 格	梱包単位
JF-3YY03Q	4987494311781	タイプ3	DEHPフリー	10本×10箱=100本
JF-3YY02P	4987494315574	タイプ2	PVCフリー	10本×10箱=100本
JF-3YY03P	4987494315581	タイプ3	PVCフリー	10本×10箱=100本

販売名:ジェイフィード EN Yジョイント 医療機器届出番号: 34B1X00001000081

快適な経腸栄養をサポート

経腸栄養ポンプ Amika®

- 栄養療法において簡便かつ直感的に使用できるように、また慢性疾患や重症な患者さんの快適な栄養投与のためにデザインされた経腸栄養ポンプ。

優れた機能設計

- センサーテクノロジーによる高い検出能力。
- 調節可能なエア検出および圧力閾値。
- キーパッドロック (Keypad Lock) 機能により、Amikaの誤操作を防止。

直感的操作で効率が向上

- 誰でもすぐに理解できるシンボル表示。
- 病院や在宅での医療に適した、人間工学に基づくロバストデザイン。
- ワークフローを最適化する、主要な機能へのダイレクトアクセス。

簡単操作による快適な使用感

- 静音設計。
- 可動性をより高めたコンパクトなデザインとロングライフなバッテリー。
- あらゆる環境に適応できるポンプ設定。
- さまざまなスタンドに対応できる汎用型ポンプホルダ。



Z044198

仕様

ポンプ寸法	138 (H) × 128 (W) × 48 (D) mm
内蔵バッテリー	20時間±5% (125mL/h)
質量	610g
流量精度	±10%
投与速度 (流量) 設定範囲	1~600mL/h
目標投与量 (予定量) 設定範囲	1~5,000mL
プライミング	オート・セミオート・手動
投与履歴	250回分
アラーム履歴	250回分
積算量 (総投与量) カウンター	1mL~99,999L

※製造販売業者: フレゼニウスカービジャパン株式会社

品 番	JANコード	梱包単位
Z044198	4086000851879	1台

販売名: 経腸栄養ポンプ Amika 承認番号: 22600BZX00433000

Amika® ポンプ用経腸栄養セット

- 経腸栄養ポンプ Amika® 専用の経腸栄養投与セット。
- ワンタッチクランプで簡単装着。
- バッグ無は Q-LOCK® を採用しているので、ジェイフィード栄養ボトル等とのスムーズな接続と確実なロックが可能。
- バッグ付の容量は1,500mL。



品 番	JANコード	型 式	規 格	梱包単位
JF-3YP30AQ	4987805230749	ISO 80369-3タイプ、バッグ無：Qロックタイプ	Amika用 220cm 25入	25本× 4箱=100本
JF-3YP30AQ1	4987805230756	ISO 80369-3タイプ、バッグ無：Qロックタイプ	Amika用 220cm 10入	10本×10箱=100本
M44310676	4987805230770	ISO 80369-3タイプ、バッグ付：DEHPフリー	220cm 30入	30個
M44310676S	4987805230794	ISO 80369-3タイプ、バッグ付：DEHPフリー	220cm 10入	10個

販売名：フレゼニウス Amikaポンプ用経腸栄養セット 認証番号：226AABZX00147000

※製造販売業者：フレゼニウスカービジャパン株式会社

フレゼニウス ポンプ用経腸栄養セット

- アプリックス® スマート専用の経腸栄養投与セット。
- ワンタッチクランプで簡単装着。
- バッグ無は Q-LOCK® を採用しているので、ジェイフィード栄養ボトル等とのスムーズな接続と確実なロックが可能。
- バッグ付の容量は1,500mL。

※アプリックススマート本体の販売は終了しています。



品 番	JANコード	型 式	規 格	梱包単位
JF-3YP30Q	4987805230725	ISO 80369-3タイプ、バッグ無：Qロックタイプ	アプリックススマート用 220cm 25入	25本× 4箱=100本
JF-3YP30Q1	4987805230732	ISO 80369-3タイプ、バッグ無：Qロックタイプ	アプリックススマート用 220cm 10入	10本×10箱=100本
M44310677	4987805230763	ISO 80369-3タイプ、バッグ付	250cm 30入	30個
M44310677S	4987805230787	ISO 80369-3タイプ、バッグ付	250cm 10入	10個

販売名：フレゼニウス ポンプ用経腸栄養セット 認証番号：221AABZX00199000

※製造販売業者：フレゼニウスカービジャパン株式会社

アクセサリも充実

採液デバイス

ジェイフィード® EN採液チップ

- ジェイフィードENシリンジに接続し、アンプルや広口瓶、薬杯などから経口薬を採取する際に使用。





品 番	JANコード	梱包単位
JF-3S01	4987494314065	50本×10箱=500本

販売名:ジェイフィードEN採液チップ 医療機器届出番号: 34B1X00001000106

ジェイフィード® EN採液ノズル

- ジェイフィードENシリンジに接続し、半固形状流動食などを吸引する際に使用。

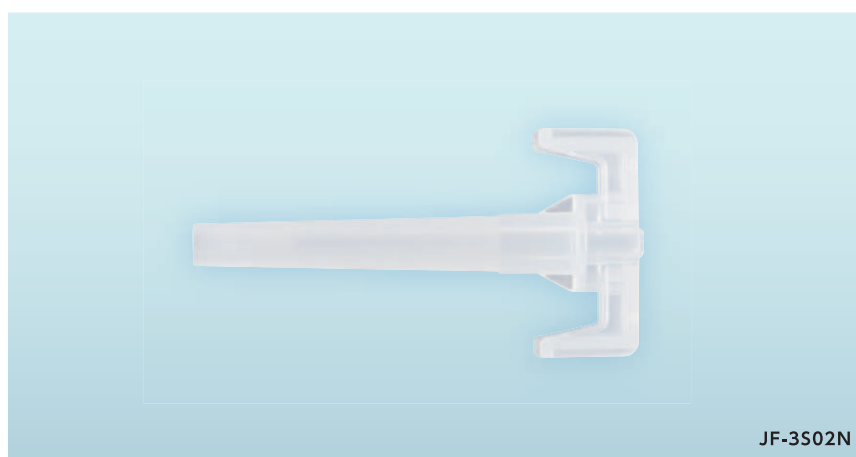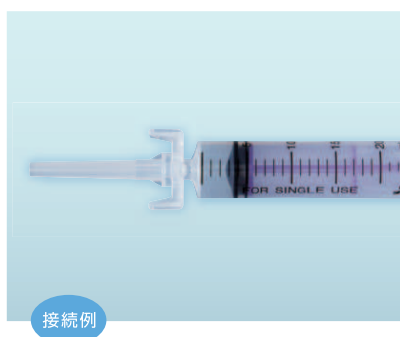


品 番	JANコード	梱包単位
JF-3S02N	4987494323821	25個×10箱=250個

販売名:ジェイフィードEN採液ノズル 医療機器届出番号: 34B1X00001000113

クリーニングデバイス


ジェイフィード® ENスワブ

- 固定型のオスコネクタ内部の栄養剤等をふきとることが可能。

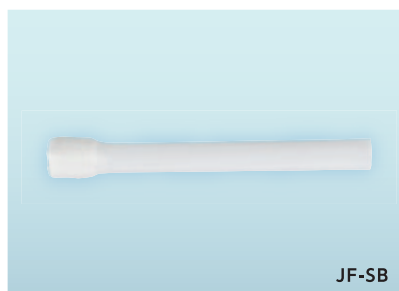


JF-SB


使用方法

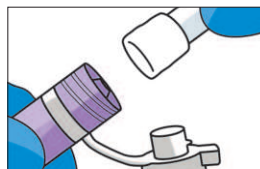


① ENスワブの綿体とオスコネクタの中心を合わせます。

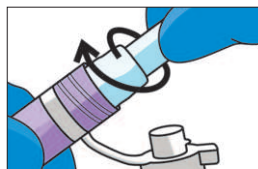

② ENスワブをゆっくりと時計回りに回転させながらオスコネクタに挿入します。

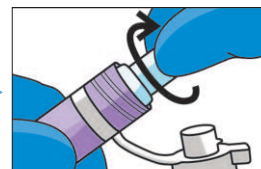

③ ENスワブを奥まで挿入した後、そのまま1回転させ、オスコネクタ内の栄養剤等を拭き取ります。

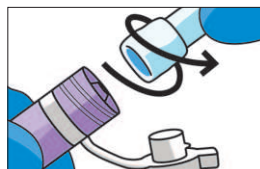

④ ENスワブをゆっくりと反時計回りに回転させながら取り外します。


■ ジェイフィード® ENスワブ

品 番	JANコード	梱包単位
JF-SB	4987494316304	100本×20箱=2,000本

品名:ジェイフィードENスワブ 非医療機器


ジェイフィード® ENプロテクトアダプタ

- ジェイフィード栄養カテーテル等に接続し、オスコネクタ部への栄養剤等の付着を軽減させる際に使用。

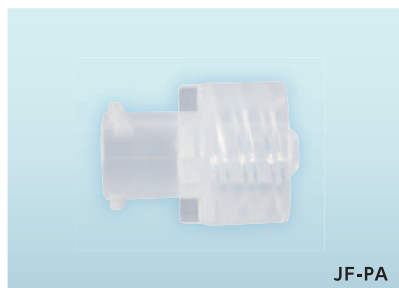


JF-PA

使用方法

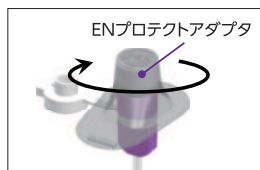

① 開封後、包装を把持したまま、オスコネクタに接続します。

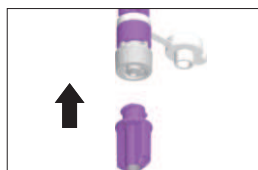

② 包装を取り外し、栄養セット等を接続後、栄養剤等を投与します。



③ 栄養剤等の投与終了後は、栄養セット等のコネクタのみを外します。



④ その後、ENシリンジにてフラッシュを行います。



⑤ フラッシュ後、ENシリンジと共にENプロテクトアダプタを外します。



⑥ カテーテル等のキャップを閉じて完了です。

品 番	JANコード	梱包単位
JF-PA	4987494315598	50個×10箱=500個


販売名:ジェイフィードENプロテクトアダプタ 医療機器届出番号: 34B1X00001000114

アクセサリも充実

ジェイフィード® ENシリンジカバー

- ジェイフィードENシリンジ外筒のつば側入口に取り付け、外部からの異物等が注入器内へ混入するのを防止。

※ENシリンジカバー大はジェイフィードENシリンジの20～50mL、ENシリンジカバー小は2.5～10mLにご使用いただけます（他社の製品には使用できません）。

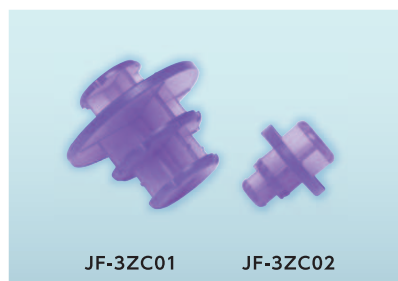

使用方法



① 包装開封後、ENシリンジの内筒をはずしてから、ENシリンジ先端に栄養カテーテル等を接続します。



② 先端から流出しないよう注意しながら外筒にミルク（栄養剤）を注入します。



③ ミルク（栄養剤）を注入後、まっすぐカバーをはめます。



④ カバー本体にかからないようつるし、投与します（脱落の恐れがあるのでカバーにはかけないで下さい）。



⑤ 投与終了後、カバーの柄を持ち、斜めにしながらはずします。



品 番	JANコード	型 式	対象ENシリンジ容量	梱包単位
JF-3ZC01	4987494314713	大	20～50mL	10個×20箱=200個
JF-3ZC02	4987494314690	小	2.5～10mL	20個×20箱=400個


販売名:ジェイフィードENシリンジカバー 医療機器届出番号: 34B1X00001000116

ジェイフィード® ENコネクタカバー


- ジェイフィード栄養カテーテル等のISOオスコネクタに取り付け、コネクタ部が直接肌にあたらないようにするための保護カバー。
- コネクタカバーをつけたまま栄養剤を投与することも可能。




使用方法

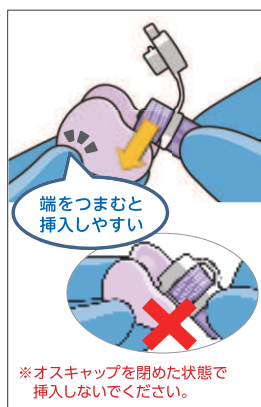

① ISOオスコネクタを持ち、キャップを開けた状態で、挿入口からISOオスコネクタを挿入します。

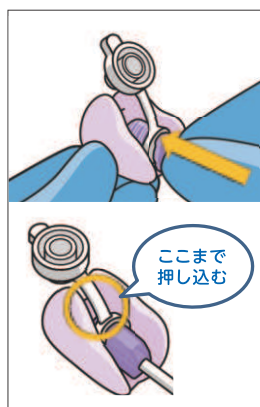

② オスキャップが本品のブリッジに当たるまでISOオスコネクタを押し込みます。

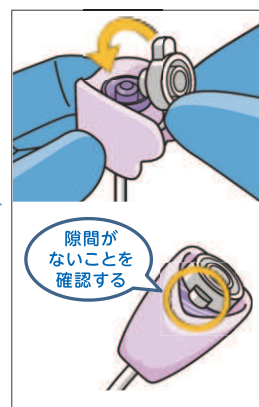

③ オスキャップを隙間なく確実に閉めます。

品 番	JANコード	梱包単位
JF-CC	4987494327690	10個×10箱=100個

品名:ジェイフィードENコネクタカバー 非医療機器

pHチェッカー5.5

- 採取した検液のpHを測定する試験紙。
- 測定値の範囲は5.0 ～ 6.0で、変色表のpH間隔は0.2。



JF-PH55

使用方法



① ケースから台紙を取り出し、試験紙を一枚取り、膿盆(またはトレイ等)の上におきます。



② 採液した検液を1～2滴試験紙に滴下します。




③ 検液を滴下して、色調が変わったら、すぐに変色した部分を変色表と比較確認します。比較・確認後、本品をケースに戻します。

品 番	JANコード	梱包単位
JF-PH55	4987494050710	10個×50箱=500個

品名:pHチェッカー 非医療機器


異形間接続のための変換コネクタ

EN変換コネクタ

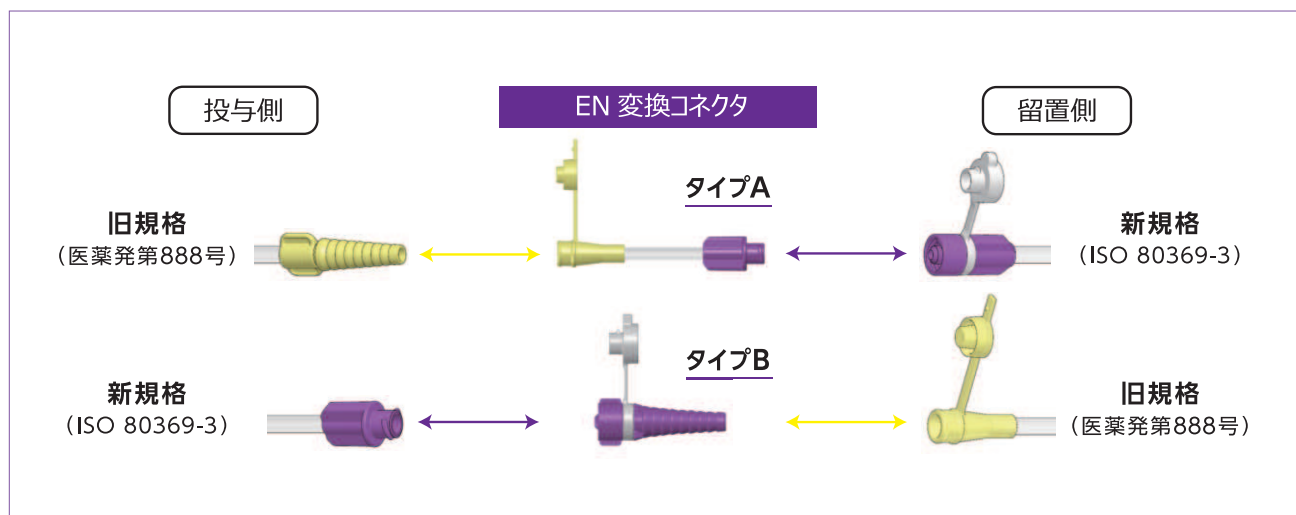


- 経腸栄養分野の旧規格製品 (医薬発第888号) と新規格製品 (ISO 80369-3) のコネクタ接続を可能にする変換コネクタ。
- タイプAは旧規格製品 (医薬発第888号) の栄養セット等を新規格製品 (ISO 80369-3) の栄養カテーテル等に接続する際に使用する変換コネクタ。
- タイプBは新規格製品 (ISO 80369-3) の栄養セット等を旧規格製品 (医薬発第888号) の栄養カテーテル等に接続する際に使用する変換コネクタ。
- スターターキットは変換コネクタタイプAとタイプB、ENスワブ3本が同梱されたキット製品。スターターキットを用意しておくことで、異なる形状にあわせて接続可能。

タイプA

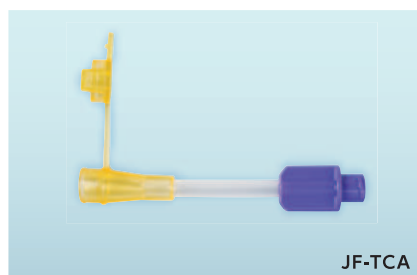

タイプB

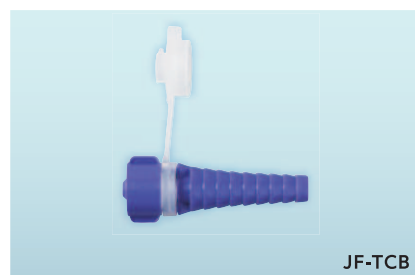

スターターキット



品 番	JANコード	型 式	梱包単位
JF-TCA	4987494306985	タイプA	25個×8箱=200個
JF-TCB	4987494312108	タイプB	25個×8箱=200個
JF-TCAB	4987494316243	スターターキット	10セット×10箱=100セット

販売名: EN変換コネクタ 医療機器届出番号: 34B1X00001000105

- このカタログは株式会社ジェイ・エム・エスが発行するものであり、
いかなる形においても発行者の許可なく全部または一部の複製ならびに転載することを禁じます。
- ジェイフィールド、Q-LOCKは株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。
- Amika、アブリックスはFresenius Kabi AGの登録商標です。



詳細はJMS 特設ページへ

<http://medical.jms.cc/top.html>



掲載内容

ISO 80369の概要説明・対象製品と出荷時期
安全使用のポイント・使用上の注意点・取扱い動画
よくある質問 等

JMS ISO 栄養



ISO専用ダイヤル 0120-922-737

受付時間：月～金曜日(平日) 9:00～17:00



製造販売業者

株式会社 ジェイ・エム・エス

〒730-8652 広島市中区加古町12番17号

<http://www.jms.cc/>