


JMS弱酸性水生成装置 WA-1500



The sterilization method by
supplying weak-acid
water is provide a safe
dialysis treatment

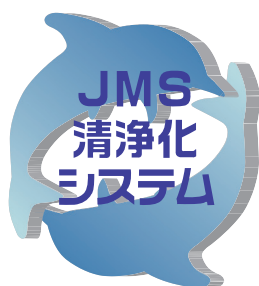

Device Overview

- JMS透析用水処理装置ピュアフロー[®]シリーズと連動することにより、RO水タンク及びRO水供給ラインを弱酸性水にて洗浄・消毒を行うことができます。
- 給水流量に応じ、連続的に安定した弱酸性水の生成ができます。
- 生成された弱酸性水はpH計を用いて連続的に監視します。
- 外部タンクを設置することで、生成した弱酸性水を貯留することができます(オプション機能)。

弱酸性水の殺菌能

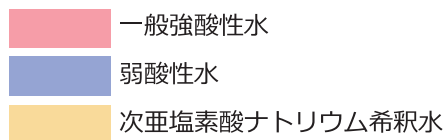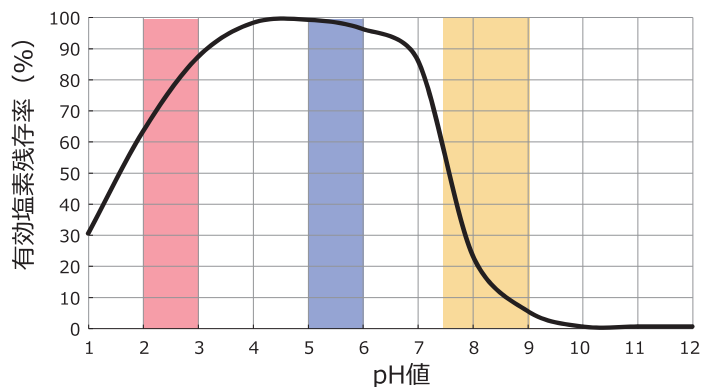

仕様

装置名称	JMS 弱酸性水生成装置 WA-1500		
外形寸法(mm)	510(W)×655(D)×1500(H)		
重 量	約160kg(乾燥時) 約220kg(運転時)		
設置環境	温度	10～40℃	
	湿度	30～85%RH(結露のないこと)	
電 源	AC100V±10% 50／60Hz		
消費電力	150VA		
電源保護形式	クラスI B形		
供給条件	10～25L／min		
給水条件	流量	10～25L／min	
	圧力	0.1～0.3MPa	
	温度	15～35℃	
生成水の濃度設定	30、50、80*ppm 3段階設定		
生成水のpH	4.5～8.0(標準5.8)pH		
pHセンサー	pH計(電極式)		
pH測定範囲	pH 1～14		
指定薬液	次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物用):6%、12% 酢酸:30%		

*塩素濃度 80ppmを選択する場合は、次亜塩素酸ナトリウム12%しか使用できません。

- 外観・仕様は予告なしに変更することがあります。
- カタログの写真は印刷物のため実際のものとは異なる場合があります。
- 使用方法については、取扱説明書に従ってください。
- 使用にあたっての“警告・注意”については、取扱説明書に記載しています。

寸法図

