

JMS

AquaStream

血液濃縮器

**アクアストリーム®
AS11 / AS04**



JMS 高度管理医療機器
エチレンオキサイドガス滅菌済
非熱処理性
血液濃縮器
アクアストリーム® AS11
製造番号
21400BZ00061000
有効膜面積 1.1m²
最大膜圧力 66.7kPa(=500mmHg)
滅菌年月日
使用期限

JMS 高度管理医療機器
エチレンオキサイドガス滅菌済
非熱処理性
血液濃縮器
アクアストリーム® AS04
製造番号
21400BZ00061000
有効膜面積 0.4m²
最大膜圧力 66.7kPa(=500mmHg)
滅菌年月日
使用期限

アクアストリーム[®] AS11／AS04

グリセリンフリーでスピーディーなセットアップ!



セットアップが簡単

- ・グリセリンフリーのポリエーテルスルホン膜のためグリセリンの洗浄操作が不要。(プライミング操作は必要です。)
- ・洗浄終了時の再接続が不要で、汚染の危険性を回避できます。

ポリエーテルスルホン膜の優れた安定性と生体適合性


高い除水性能により迅速な水分管理が可能

- ・一時的な高度希釈状態の防止と省力化が可能。
- ・電解質補正にともなう大量除水にも対応可能。
- ・MUF (Modified Ultrafiltration method) 施行時間の短縮。

血液有用成分の保持

- ・血球成分、アルブミン成分及び凝固因子成分等を保持し、輸血量の低減が期待できます。

性能

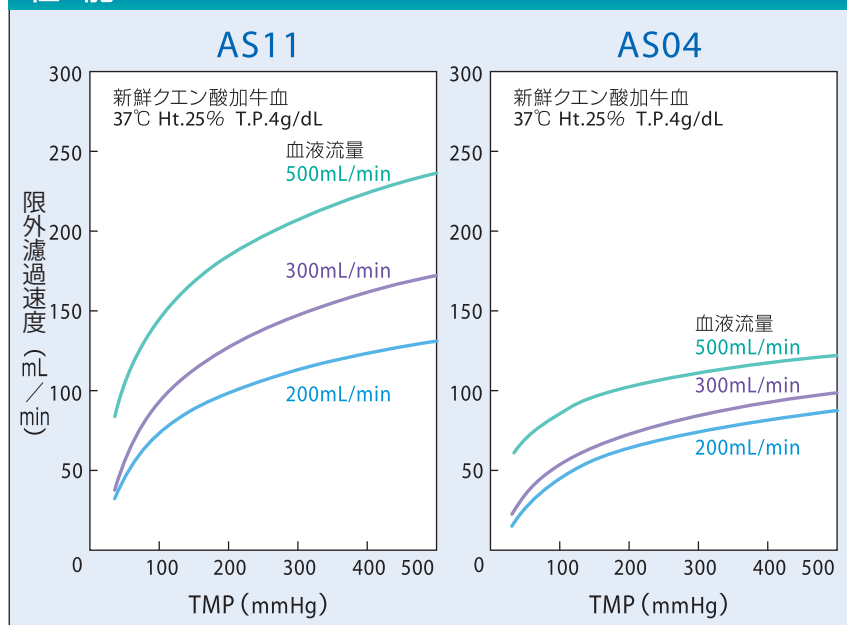

血液流量、ヘマトクリット、蛋白濃度、その他臨床パラメーターにより、限外濾過速度は大きく変化しますので、これらのことを十分理解しておく必要があります。

仕様

項目	AS11	AS04
有効膜面積(m ²)	1.1	0.4
血液充填量(mL)	62	29
中空糸材質	ポリエーテルスルホン	
最大使用圧力	66.7 kPa (500mmHg)	
滅菌方法	エチレンオキシドガス滅菌	
品番	JK-HCAS11	JK-HCAS04
医療機器承認番号	21400BZZ00061000	