

ヘモグロビン分析装置

CompoLab TS

Speedy

Self-check

Simple cleaning



Measures Hb within **2** seconds !

コンポラブTSの特長

測定時間

1~2秒(標準)で測定できます。


温度・湿度の影響を受けません

キュベットに試薬を使用していないため、温度や湿度の影響を受けません。



バッテリーで約40時間稼動

- ・約40時間の連続使用が可能です。
(満充電したバッテリーを使用して連続測定した場合)
- ・バッテリーの残量目安が液晶画面に表示されるので、一目で確認できます。

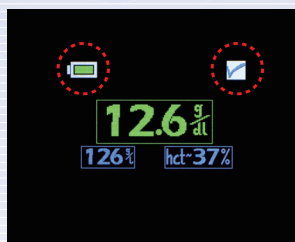

セルフチェック機能

装置の電源が入る度、また、測定の度に自動的にセルフチェックを行います。

取り外し可能で手入れが簡単なホルダー

- ・ホルダーは、簡単に取り外すことができ、容易にきれいにすることが出来ます。
- ・ホルダーは、測定時に軽く押すことにより、自動で閉まります。



装置構成

- ① コンポラブTS 本体
- ② USBケーブル
- ③ ACアダプタ
- ④ キャリングケース



コンポラブTS仕様

販売名	コンポラブTS
一般的名称	ヘモグロビン分析装置
品番	JB-CLTS
サイズ	21.5×14×7cm(縦×横×高さ)
重量	0.5kg(本体)
電源	リチウムイオンバッテリー 3.6V AC100~240V 50~60Hz
操作温度	15~35℃
保管温度	0~50℃

必要検体量	10μL
測定範囲	0~25.5g/dL (0~255g/L, 0~15.9mmol/L)
精度	±0.3g/dL (測定範囲: 0~20.0g/dL) ±0.7g/dL (測定範囲: 20.1~25.5g/dL)
測定波長	450-750nmの多波長
測定原理と方法	多波長の光を用いた分光光度法によるヘモグロビン定量
データインターフェース	USB2.0
クラス分類	I: 一般医療機器
医療機器届出番号	13B1X10058000002

コンポラブTS用キュベット (別売)

- 試薬を使っておりません。
- 開封後も長期保存が可能です。



品名	コンポラブTS用キュベット
品番	JB-CLTSC
有効期限	約2年(使用期限は容器及び外装に記載)
保管温度	0~50℃
梱包単位	100個入り×5袋=500個

非医療機器

ヘモグロビンコントロール (別売)

- コンポラブTSの精度確認用コントロールです。
- 保存方法
- ・未開封時: 2~25℃保存で約6ヶ月使用できます。
(使用期限は容器及び外装に記載しています。)
- ・開封後: 2~35℃保存で約2ヶ月使用できます。



品名	品番	容量	梱包単位
コントロールHBT1 (low)	JB-CLTSCL	1.9mL	2本
コントロールHBT2 (medium)	JB-CLTSCM	1.9mL	2本
コントロールHBT3 (high)	JB-CLTSCH	1.9mL	2本

非医療機器

- 外観・仕様は予告なしに変更することがあります。
- カタログの写真は印刷物のため実際のものとは異なる場合があります。
- 商品写真の比率は同比率ではありません。
- 「添付文書」「取扱説明書」をよく読み、正しくご使用下さい。